

CE

VR2-A
ユーザーズマニュアル | 日本語

はじめに

この取扱説明書はVR2-A電動車いすの取扱説明書の一部を構成し、操作パネルの機能を解説しています。

電動車いすとその付属品に同梱されている全マニュアルのすべての指示と警告を読み、それに従ってください。誤った使用により使用者が怪我をしたり、車いすを損傷したりする可能性があります。これらの危険を緩和するために、ドキュメンテーションをすべて注意深くお読みください。特に安全についての指示および関連する警告表示に注意してください。

使用を始める前に、車椅子と付属品の各種ボタン、機能およびステアリング制御や、座席調節の可能性等の確認に十分な時間をとっていただくことは、極めて重要です。

すべての情報、写真、イラスト、仕様は、その時点で入手できる製品情報を基にしています。図とイラストは代表的な例であり、具体的な部品の正確な描写としては意図されていません。

当社には事前通知無しに製品に変更を行なう権限があります。

Permobilが作成および発行

バージョン: 3

日付: 2024-03-11

発注番号: 336778 jpn-JP

ペルモビールへのお問い合わせ方法

Permobil K.K. / ペルモビール株式会社

135-0004

2 Chome-7-6 Morishita, Koto-kiss, Tokyo /
東京都江東区森下2-7-6

Japan / 日本



+81 03 6659 9500



+81 03 6659 9507



pkk.support@permobil.com



www.permobil.com

ペルモビールグループ本社

Permobil AB

Per Uddéns väg 20

861 36 Timrå

Sweden



+46 60 59 59 00



info@permobil.com



www.permobil.com

1	安全性	4
1.1	警告表示のタイプ	4
1.2	警告表示	4
2	ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能	5
2.1	一般	5
2.2	充電ソケット	6
2.3	On/Off ボタン	7
2.4	ホーンボタン	7
2.5	最大速度ボタン	7
2.6	最大速度インジケータ	8
2.7	バッテリー電圧インジケータ	9
2.8	座席機能ボタン	10

1 安全性

1.1 警告表示のタイプ

この説明書では次のタイプの警告表示が使用されています:



警告!

回避できなかった場合に、重傷または死亡ならびに製品やその他の所有物への損害の原因となる可能性がある危険な状況を示しています。



注意事項!

防げなかった場合に、製品やその他の所有物への損害の原因となる可能性がある、危険な状況を示しています。



重要!

重要な情報を示します。

1.2 警告表示



警告! 破損したジョイスティックのカバーは必ず交換します。

雨、雪、泥、水しぶきなど、どのような種類の水分にも車いすをさらさないようにしてください。

カバーやジョイスティックブーツにひび割れや裂け目がある場合は、ただちに交換する必要があります。これを怠ると湿気が電子装置に入る可能性があり、怪我や火災を含む所有物の損害の原因になります。



重要! ジョイスティックを放すとシートの動きが止まります

ジョイスティックを放すと、座席の動きが止まります。



重要! 提供されたバッテリー充電器のみを使用してください


車いすと一緒に提供されたバッテリー充電器以外の何らかのデバイス、またはロックキーが操作パネルの充電器ソケットで接続された場合、車いすの保証は無効になります。

2 ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2.1 一般

- A. 主電源オンまたはオフ
- B. ホーンボタン
- C. 最高速度、減速
- D. シート機能インジケータ
- E. 座席機能ボタン
- F. バッテリー電圧インジケータ
- G. 最大速度インジケータ
- H. 最高速度、加速
- I. ジョイスティック

操作パネルはジョイスティックと機能ボタンで構成されています。充電ソケットはパネルの前部にあります。

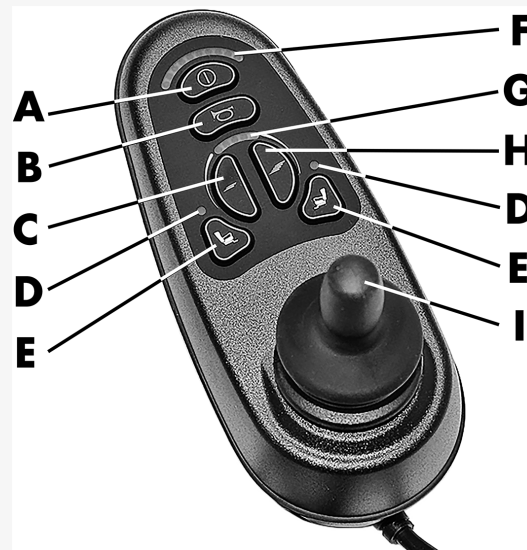


2.2 充電ソケット

このソケットは車いすを充電したり、ロックしたりする場合のみに使用するものです。このソケットにはいかなる種類のプログラミングケーブルも接続しないでください。このソケットは、他の電動デバイスの電源として使用しないでください。他の電気機器を接続すると、制御システムが損傷したり、車いすのEMC（電磁両立性）性能に影響を与えたりする可能性があります。




重要! 提供されたバッテリー充電器のみを使用してください

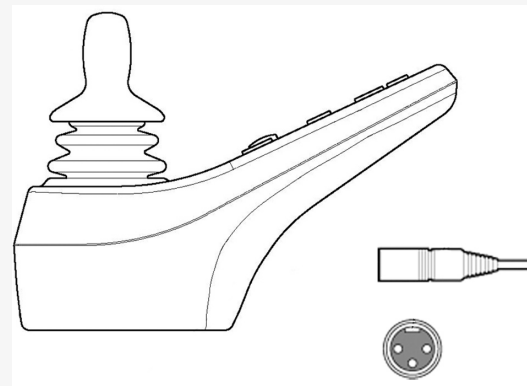

2.3 On/Off ボタン

On/Off ボタンで車いすの電源をオンまたはオフにします。

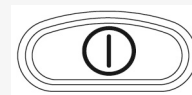


2.4 ホーンボタン

このボタンが押されている間、ホーンが鳴ります。



2.5 最大速度ボタン

これらのボタンは、車いすの最大速度を増減させます。

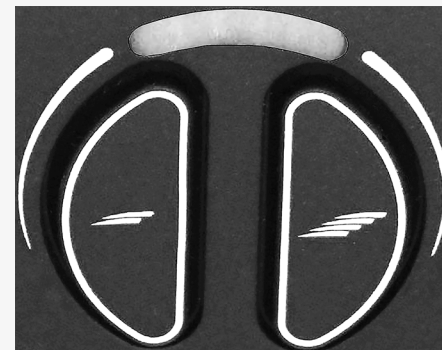

2.6 最大速度インジケータ


車いすに設定されている最高速度を示します。

最高速度計または運転プロフィールインジケータは、車いすの電子機器の故障表示器としても機能します。

1-2個のLEDは低い最大速度を表示します

3-4個のLEDは平均最高速度を表示します

5個のLEDは高い最高速度を表示します。

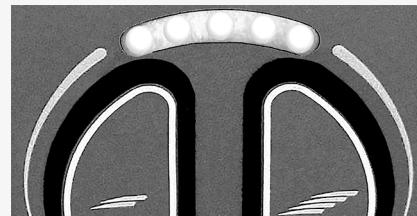

2.7 バッテリー電圧インジケーター


ディスプレイにバッテリーの状態が表示されます（左から右）。

赤、黄、緑	充電完了
赤、黄	半充電
赤	バッテリーの充電

バッテリー電圧インジケーターは、バッテリーの残量を正確に示すものではありませんが、バッテリー切れによる不必要な停止を回避するための目安を提供します。

運転を停止し、電源機能を使用しなくなってからおよそ1分経過すると、インジケーターはより正確な値を表示します。


バッテリー電圧インジケーターは、車いすの電子機器用の故障インジケーターとしても機能します。

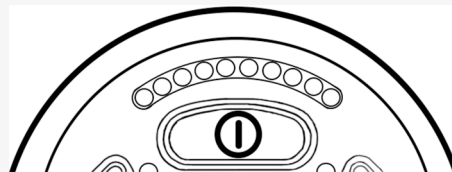

2.8 座席機能ボタン

VR2 -A パネルは2座席機能をコントロールするために使用します。

座席には、インストールされた機能をコントロールする、2つの座席機能ボタンがあります。機能はボタンのうちのいずれか1つを押すことによりオンになります。機能がオンである場合、ボタン上のLEDインジケーターが点灯します。その後、選択した機能は、ジョイスティックでコントロールされます。

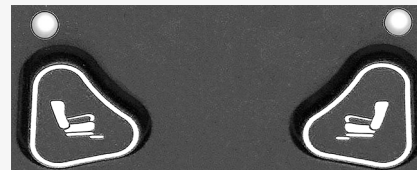

permobil

336778 jpn-JP



www.permobil.com