

# Modèle 3 | Nouvelles illustrations de boîtiers de commande

Le manuel d'utilisation de votre boîtier de commande contient des informations sur la manière d'utiliser votre fauteuil roulant. Les illustrations des fauteuils roulants électriques du modèle 3 ont été actualisées par rapport à celles du manuel d'utilisation. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une traduction visuelle des icônes figurant dans les exemples.

Vous trouverez le manuel d'utilisation de votre boîtier de commande ici :



[https://documentation.permobil.com/manuals/control\\_panels/](https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/)

Icônes de base	Ancienne	Nouvelle	Icônes des exemples	Ancienne	Nouvelle
Lièvre			Élévation de l'assise		
Tortue			Inclinaison de l'assise		
Orientation			Dossier		
Température			Repose-jambes		
Verrou du régulateur de vitesse					

Voici quelques-unes des nouvelles fonctions de votre boîtier de commande.

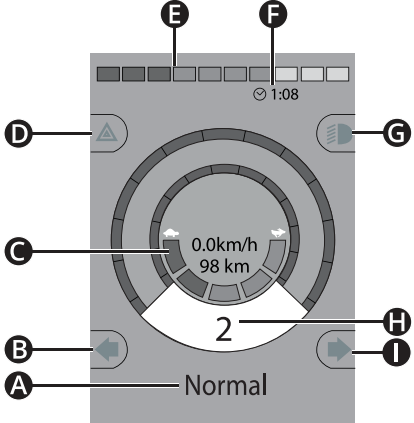

## 1. Niveau de la batterie

- Les niveaux de la batterie s'affichent comme suit :
  - vert 45-100 %
  - jaune 25-44 %
  - rouge 0-24 %
- La barre de batterie clignote lorsqu'elle passe du vert au jaune et entre les niveaux jaunes. Au niveau rouge, elle clignote plusieurs fois.
- Le niveau de la batterie est également indiqué en pourcentage à droite de la barre de batterie. Il change par paliers de cinq pour cent.

## 2. Flèches

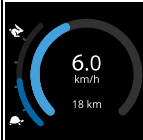
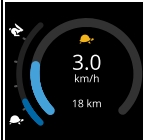
- Les flèches indiquent dans quelles directions vous pouvez régler une fonction.
- Si une direction n'est pas possible, la flèche est grise.
- La flèche clignote entre le blanc et le gris lorsqu'une fonction a atteint sa position finale.

Consultez le tableau ci-dessous pour comparer l'ancien et le nouvel écran du boîtier de commande.



Présentation de l'écran	Ancienne	Nouvelle
<p> <b>A</b> Nom du profil  <b>B</b> Clignotant gauche (et inclinaison du repose-jambes)  <b>C</b> Indicateur de vitesse maximale  <b>D</b> Feux de détresse (et élévateur d'assise)  <b>E</b> Indicateur de batterie  <b>F</b> Horloge  <b>G</b> Phares (et inclinaison du dossier)  <b>H</b> Numéro du profil  <b>I</b> Clignotant droit (et inclinaison de l'assise)                 </p> <p>                     Ⓓ Vitesse actuelle ou limitations en mode assise, voir ci-dessous.                 </p>		

### 3. Cercle Ⓓ

- En mode conduite, les limitations de la vitesse maximale sont affichées sous forme de combinaison de cercle et de tortue orange.

<p>La vitesse maximale est réglée sur 6 km/h et aucune restriction n'est appliquée.</p>	
<p>Voici un exemple lorsque la vitesse maximale est limitée à 3 km/h, ce qui est indiqué par deux éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la barre réduite à gauche pour le réglage de la vitesse maximale, et</li> <li>la tortue orange affichée au milieu de l'écran.</li> </ul>	

- En mode d'assise, le cercle indique des informations différentes selon sa couleur :

<p>La couleur verte indique que la vitesse maximale n'est pas limitée par la fonction d'assise active affichée.</p>	
<p>La couleur jaune indique que la vitesse maximale est limitée par la fonction d'assise active affichée.</p>	
<p>La couleur rouge indique que la conduite est inhibée par la fonction d'assise active affichée.</p>	