

El manual de usuario del panel de control contiene información sobre cómo utilizar la silla de ruedas. Las sillas de ruedas eléctricas del modelo 3 tienen gráficos actualizados, a diferencia de los que se muestran en el Manual de usuario. Consulte la siguiente tabla para ver una traducción visual de íconos de ejemplo.

Puede encontrar el manual de usuario de su panel de control aquí:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Íconos básicos	Anteriores	Nuevos	Íconos de ejemplo	Anteriores	Nuevos
Liebre			Elevación del asiento		
Tortuga			Inclinación del asiento		
Enfoque			Respaldo		
Temperatura			Reposapiernas		
Bloqueo de velocidad					

Las siguientes son algunas de las nuevas funciones de su panel de control.

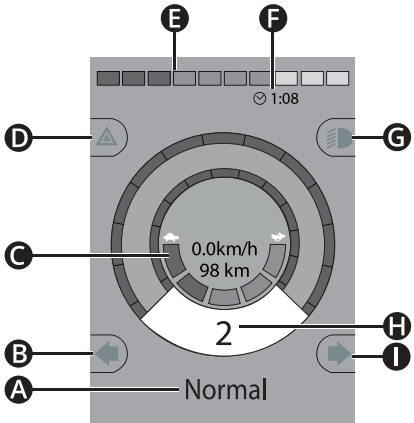
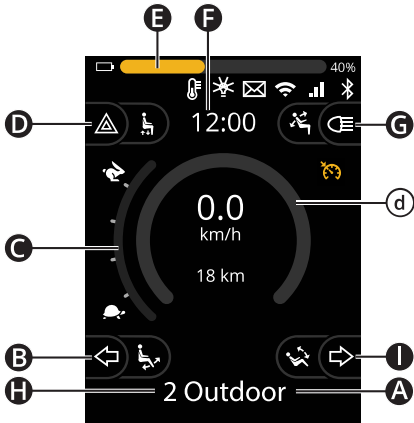
1. Nivel de la batería

- Los niveles de la batería se muestran de la siguiente manera:
 - verde 45-100 %
 - amarillo 25-44 %
 - rojo 0-24 %
- La barra de la batería parpadea cuando cambia de verde a amarillo y entre los niveles amarillos. Parpadea repetidamente en el nivel rojo.
- El nivel de la batería también se muestra como porcentaje a la derecha de la barra de la batería. Cambia en pasos de cinco por ciento.

2. Flechas

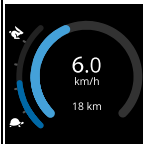

- Las flechas indican las direcciones en las que puede ajustar una función.
- Si no es posible una dirección, la flecha será gris.
- La flecha parpadea entre blanco y gris cuando una función alcanzó su posición final.

En la siguiente tabla puede comparar la pantalla anterior y la nueva de su panel de control.




Descripción general de la pantalla	Anteriores	Nuevos
<p> A Nombre del perfil B Señal de giro a la izquierda (e inclinación del reposapiernas) C Indicador de velocidad máxima D Luces de emergencia (y elevación del asiento) E Indicador de la batería F Reloj G Luces (e inclinación del respaldo) H Número de perfil I Señal de giro a la derecha (e inclinación del asiento) d Velocidad actual o limitaciones en el modo de asiento, ver abajo. </p>	 <p>Diagrama del panel de control antiguo. Muestra un velocímetro central con '0.0km/h' y '98 km' en el fondo. Un número '2' indica el perfil seleccionado. El modo de conducción es 'Normal'. Elementos etiquetados: A (Nombre del perfil), B (Señal de giro a la izquierda), C (Indicador de velocidad máxima), D (Luces de emergencia), E (Indicador de la batería), F (Reloj), G (Luces), H (Número de perfil), I (Señal de giro a la derecha).</p>	 <p>Diagrama del panel de control nuevo. Muestra un velocímetro central con '0.0 km/h' y '18 km' en el fondo. El modo de conducción es '2 Outdoor'. Elementos etiquetados: A (Nombre del perfil), B (Señal de giro a la izquierda), C (Indicador de velocidad máxima), D (Luces de emergencia), E (Indicador de la batería), F (Reloj), G (Luces), H (Número de perfil), I (Señal de giro a la derecha), d (Velocidad actual o limitaciones).</p>

3. Círculo **d**

- En el modo de conducción se muestran las limitaciones de la velocidad máxima en combinación con el círculo y la tortuga naranja.

<p>La velocidad máxima se ajusta a 6 km/h y no se aplican restricciones.</p>	 <p>Gráfico de velocidad máxima de 6 km/h. El círculo está azul y la barra de ajuste está completa.</p>
<p>La velocidad máxima está limitada a 3 km/h, lo que se indica mediante dos cosas:</p> <ul style="list-style-type: none"> la barra reducida a la izquierda para el ajuste de la velocidad máxima, y la tortuga naranja que aparece en el centro de la pantalla. 	 <p>Gráfico de velocidad máxima limitada a 3 km/h. El círculo está azul, la barra de ajuste está reducida a la izquierda y hay una tortuga naranja en el centro.</p>

- En el modo de asiento, el color del círculo indicará diferentes cosas:

<p>El color verde indica que la velocidad máxima no está limitada por la función del asiento activa mostrada.</p>	 <p>Icono de un asiento con un círculo verde alrededor.</p>
<p>El color amarillo indica que la velocidad máxima está limitada por la función del asiento activa en la pantalla.</p>	 <p>Icono de un asiento con un círculo amarillo alrededor.</p>
<p>El color rojo indica que la función del asiento activa en la pantalla impide la conducción.</p>	 <p>Icono de un asiento con un círculo rojo alrededor.</p>