

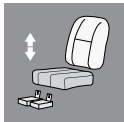



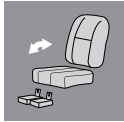













Instrukcja obsługi panelu sterowania zawiera informacje na temat obsługi wózka inwalidzkiego. Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym model 3 mają zaktualizowane grafiki w porównaniu z grafikami przedstawionymi w instrukcji obsługi. Tłumaczenie wizualne przykładowych ikon znajduje się w poniższej tabeli.

Instrukcję obsługi panelu sterowania można znaleźć tutaj:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Ikony podstawowe	Stare	Nowe	Przykłady ikon	Stare	Nowe
Zajęczek			Podnoszenie fotela		
Żółw			Pochylenie siedziska		
Ostrość			Oparcie		
Temperatura			Podnózek		
Blokada prędkości					

Poniżej przedstawiono niektóre z nowych funkcji panelu sterowania.

1. Poziom naładowania baterii
 - Poziomy naładowania baterii są wyświetlane w następujący sposób:
 - zielony 45-100%
 - żółty 25-44%
 - czerwony 0-24%
 - Pasek baterii miga, gdy zmienia kolor z zielonego na żółty i pomiędzy żółtymi poziomami. Wielokrotnie miga na czerwono.
 - Poziom naładowania baterii jest również wyświetlany jako wartość procentowa po prawej stronie paska baterii. Zmienia się ona skokowo co pięć procent.
2. Strzałki
 - Strzałki wskazują, w których kierunkach można ustawić funkcję.
 - Jeśli kierunek nie jest możliwy, strzałka jest szara.
 - Strzałka miga w kolorze białym i szarym, gdy funkcja osiągnie położenie końcowe.

Poniższa tabela zawiera porównanie starego i nowego ekranu panelu sterowania.

Przegląd ekranów	Stare	Nowe
<p>A Nazwa profilu</p> <p>B Lewy kierunkowskaz (i nachylenie podnóżka)</p> <p>C Wskaźnik prędkości maksymalnej</p> <p>D Światła awaryjne (i podnośnik siedzenia)</p> <p>E Wskaźnik akumulatora</p> <p>F Godzina</p> <p>G Światła (i nachylenie oparcia)</p> <p>H Numer profilu</p> <p>I Prawy kierunkowskaz (i nachylenie siedziska)</p> <p>d Bieżąca prędkość lub ograniczenia w trybie siedzenia, patrz poniżej.</p>		

3. Krąg d
- W trybie jazdy ewentualne ograniczenia prędkości maksymalnej są wyświetlane w formie kombinacji koła i pomarańczowego żółwia.

Maksymalna prędkość jest ustawiona na 6 km/h i nie ma żadnych ograniczeń.	
Prędkość maksymalna jest ograniczona do 3 km/h, co jest sygnalizowane przez dwie rzeczy: <ul style="list-style-type: none">zredukowany pasek po lewej stronie dla ustawienia prędkości maksymalnej orazpomarańczowy żółw wyświetlany na środku ekranu.	

- W trybie siedzenia kolor okręgu wskazuje różne rzeczy:

Kolor zielony wskazuje, że maksymalna prędkość nie jest ograniczona przez wyświetlaną aktywną funkcję fotela.	
Kolor żółty wskazuje, że maksymalna prędkość jest ograniczona przez wyświetlaną aktywną funkcję fotela.	
Kolor czerwony wskazuje, że jazda jest zablokowana przez wyświetlaną aktywną funkcję fotela.	